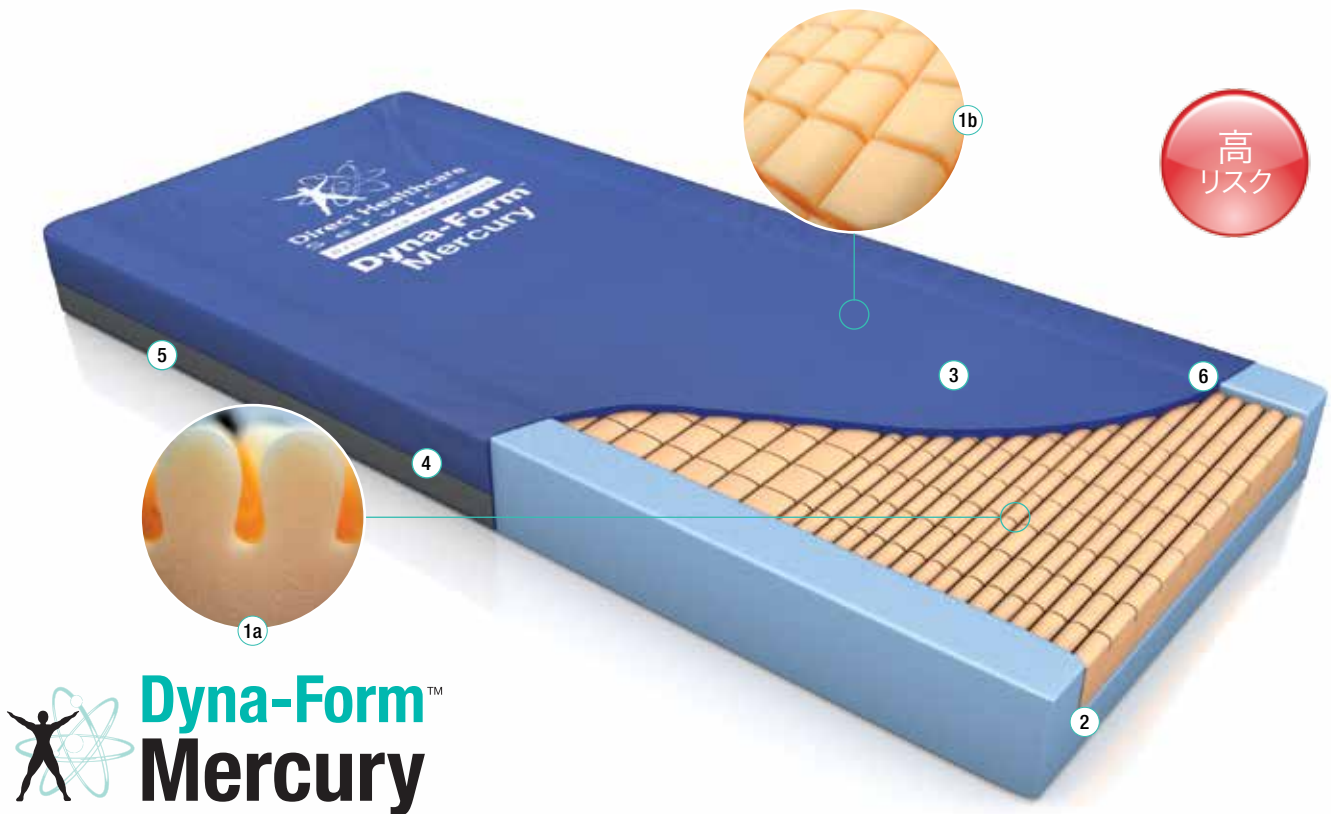




ダイナフォーム Mercury は褥瘡のリスクが高いとみなされる患者様の使用に適しています。”城郭形”の特殊なカットと最高品質の難燃高反発弾性CMHRフォームにより構成されたこの製品は、最高度の圧力再分布特性だけでなく素晴らしい患者様への快適性と製品寿命を提供しています。優れたサイドウォール構造により、患者様を移送する際に高い安定性を実現しています。丈夫で高機能ストレッチの透湿性カバー、強化ポリウレタン製のベースで構成される Mercury マットレスは、近代的な病院や介護施設、在宅看護の現場での感染管理や細胞組織生存の標準を実現しています。

機能

利点

①a ①b	城郭形状フォーム (涙滴状ダクトカット付)	1a かかと部分には小さめの城郭形状セル 1b 腰、仙骨用の大きなセル
②	最高品質のCMHRフォームのベースとサイドウォール	患者が座ったまま立ち上がれなくなるのを防止し、移動を支援
③	高機能ストレッチ素材、透湿性生地 (抗真菌剤を含浸)	剪断力と摩擦推力を減少させると同時に感染対策ポリシーにも準拠
④	完全縫製または高周波溶接のカバー	耐水性で汚染除去プロセスに役立ちます (最高95℃までの洗濯に対応)
⑤	強化PU材 / ノンスリップ仕様のベース	加水分解および浸潤防止性を備えた強固な保護表面
⑥	完全に交換可能な部品	優れた費用対効果

技術仕様

製品コード	MAT/MER/198/88/12
リスク区分	高リスク
重量制限	26 ストーン / 165kg
製品保証	フォーム8年 / カバー 4年
寸法	(長さ) 198cm × (幅) 88cm × (高さ) 12cm ご要望に応じて別サイズも承ります
疲労特性クラス	ブルー 38~40kg/m³ 通常の固さ - 200 ニュートン ピンク 38~40kg/m³ 通常の固さ - 120 ニュートン
難燃性	非常に高い BS7177:2008 (クリブ 5 コンボジット)
重量	11kg
漂白剤使用対応	1,000 ppm に希釈または 0.1% (または地域の感染対策ガイドラインに準拠して使用)